

# Mode d'emploi court

**Modèle 2080** à partir de 03/2003


**VÖLKER**

A **Hill-Rom** Company

## A. Barrières latérales

### Relever les barrières latérales


Pour relever les barrières latérales, saisissez-les par le dessus et soulevez les barrières d'abord côté tête, puis côté pied : vous devez entendre le « clic » signalant qu'elles sont bien encliquetées.

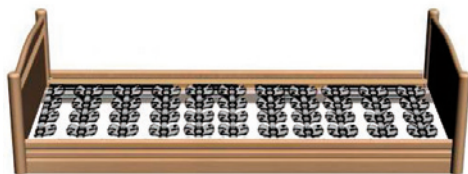


### Abaisser les barrières latérales

Pour abaisser les barrières latérales, saisissez-les par le dessus et relevez-les légèrement.

Appuyez sur le bouton de sécurité qui se trouve sur le côté, et abaissez les barrières latérales à la main, d'abord côté pied, puis côté tête.

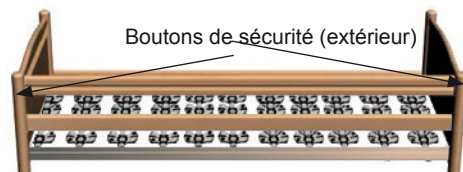

## B. Télécommande

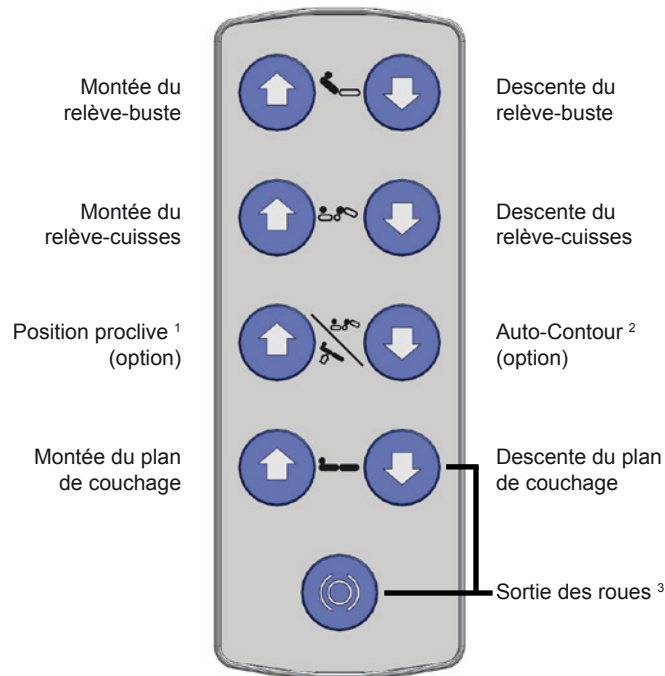


<sup>1</sup> Position basse pour les jambes

<sup>2</sup> Élévation simultanée du relève-buste et du relève-cuisses

<sup>3</sup> Appuyer simultanément sur les deux boutons. Le plan de couchage descend en position la plus basse et les roues sortent.

### C. Boîtier de contrôle du personnel soignant avec verrouillage centralisé (option)

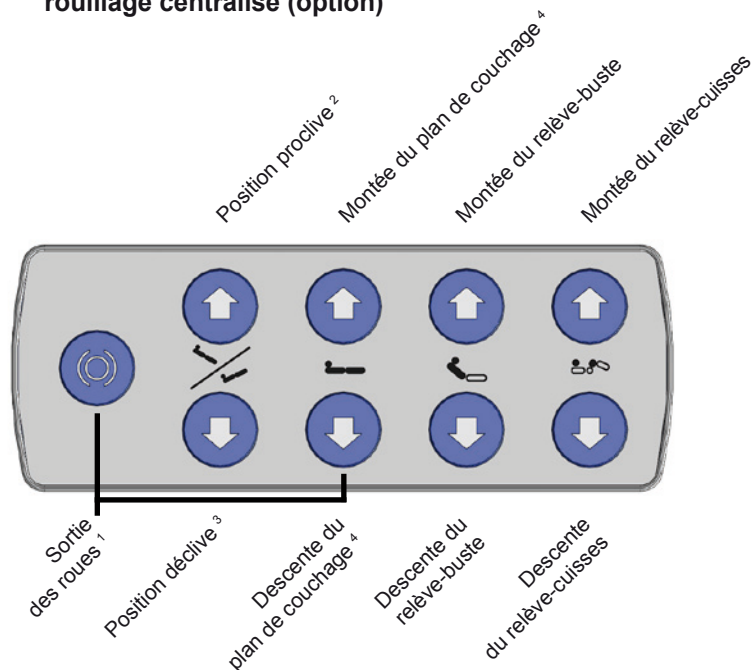

<sup>1</sup> Appuyer simultanément sur les deux boutons. Le plan de couchage descend en position la plus basse et les roues sortent.

<sup>2</sup> Position basse pour les jambes

<sup>3</sup> Position tête en bas

<sup>4</sup> Selon les pays, le boîtier de contrôle du personnel soignant peut être équipé d'une fonction automatique (double-clic)

### D. Verrouillage des touches

L'activation du verrouillage des touches de la télécommande ou du boîtier de contrôle du personnel soignant (option) entraîne le blocage de toutes les fonctions de l'unité de commande correspondante.



Télécommande ou boîtier de contrôle du personnel soignant verrouillé(e)



Télécommande ou boîtier de contrôle du personnel déverrouillé(e)

Le verrouillage du boîtier de contrôle du personnel soignant entraîne également le verrouillage de la télécommande.

**REMARQUE** Le lit correspond à la classe de protection IPX4 (protection contre les projections d'eau) et ne convient par conséquent pas au nettoyage dans un tunnel de lavage. Le lit ne doit pas être utilisé pour le transport de résidents/patients.

**REMARQUE** Veuillez observer les remarques figurant dans le manuel d'utilisation détaillé !